


4 СТРУКТУРА ПРИСТРОЮ


Основний пристрій

1. Дисплей
2. Перемикач режимів
3. Інфрачервоний датчик
4. Кнопка вниз (-)
5. Кнопка вгору (+)
6. Кнопка налаштування (Set)
7. Кнопка СТАРТ/СТОП
8. Кришка відсіку батарей

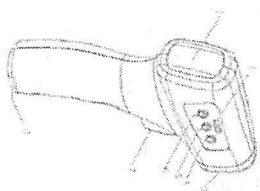

Дисплей пристрою:

1. Режим вимірювання температури об'єкту
2. Режим вимірювання температури тіла
3. Одлици вимірювання температури
4. Режим пам'яті
5. Індикатор низького заряду батареї
6. Індикатор звуку
7. Значення температури

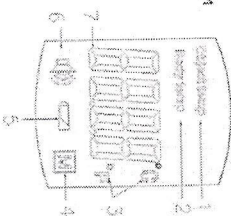

6

5 ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЇ

1. Зніміть кришку відсіку для батареї за напрямком, який вказаний на зображенні.



2. Встановіть дві батареї 1.5В розміру АА в правильне положення.



3. Закрийте кришку відсіку.



Заміна розрядженої батареї

Якщо пристрій розряджений, при увімкненні буде відображено символ . В такому випадку необхідно замінити батареї на нові, в іншому випадку пристрій не буде працювати.

Тип батареї

Будь ласка, використовуйте дві однакові батареї 1.5В розміру АА. Не використовуйте батареї, якщо термін їх використання закінчився. Якщо пристрій не використовується, впродовж тривалого часу, будь ласка, вийміть батареї.

Увага:

Утилізуйте батареї у відповідності з місцевими законами. Не кидайте батареї у полум'я, це може стати причиною пожежі або вибуху.

7

10 СПЕЦИФІКАЦІЇ

Назва пристрою	Термометр безконтактний інфрачервоний
Дисплей	Цифровий LCD дисплей
Область вимірювання	Чолові об'єкти
Діапазон вимірювання температури тіла:	32.0-43.0 °C (89.6°F~103.4°F)
Діапазон вимірювання температури об'єктів	0.0-100.0 °C (32.0°F~212.0°F)
Одиниці вимірювання	°C / °F
Роздільна здатність дисплея	0.1 °C / 0.1 °F
Точність вимірювання	±0.2 °C / ±0.4 °F. В межах 36-39 °C / 96.8-102 °F
Пам'ять	Зберігає результат останнього вимірювання
Батареї	2xAA
Розмір	95 мм * 45 мм * 155 мм
Вага	Близько 100 г (без батарей)
Автоматичне вимкнення	Через 30 секунд
Режим роботи	Безперервна робота
Термін служби батарей	500 вимірювань
Термін експлуатації	2 роки
Акcesуари	Інструкція користувача
Температура середовища експлуатації	В режимі вимірювання температури тіла: 10 ~ 40 °C / 50 ~ 104 °F. В режимі вимірювання температури об'єктів: 5 ~ 40 °C / 41 ~ 104 °F.
Середовище зберігання	Температура: -20 ~ +55 °C / -4 ~ +132 °F. Вологість: 15%-95%. При транспортуванні уникайте ударів, потрапляння під прямі сонячні промені або дощ.

14

11 ГАРАНТІЯ

Ми гарантуємо, що пристрій не має дефектів в роботі за умов нормального використання протягом одного року після покупки.

Задля ремонту використовуйте цю гарантію. Наш авторизований персонал повинен бути проінформований про пошкодження пристрою в гарантійний період. Ця гарантія покриває лише ремонт частин за умов нормального використання. Будь-які дефекти, які сталися через природні причини, такі як потопи, урагани не підлягають гарантії. Гарантія також не покриває збитки, причинені неправильним використанням пристрою, недотриманням інструкцій, випадковому пошкодженню, або через спробу ремонту неавторизованим персоналом. Пристрій не потребує калібрування. Пристрій не повинен ремонтуватись неавторизованим персоналом. Якщо термометр використовувався невірно, нехтувались інструкції або він був модифікований, гарантія втрачається.

Product name: Infrared Forehead thermometer MD1907
 Назва виробу: Термометр безконтактний інфрачервоний MD1907



Клас I

Уповноважений представник виробника в Україні:
 ТОВ «ЗДРАВО», адреса 04114, м. Київ, вул.
 Автозаводська 54/19, Літера А Телефон: +38(044) 503-78-68

E-mail: office@zdravo.in.ua



Вироблено Shenzhen Medek Bio-Medical Co., Ltd.
 No. 101 of Wenhao Industrial District, No. 13 of Yidian Road, BaoLong Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, P.R. China.
 Шеньжень Медек Біо-Медікал Ко., Лтд. №101 Венхао Індустріал Парк, №13, Юаньшан Роуд, Тонг Лі Комуніті, Баолонг Стріт, Лонганг Дістрікт, 518100 Шеньжень, КНР

15

2 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

⚠ Використання цього термометра не може замінити консультацію лікаря. Небезпечно проводити самооцінку та самостійний діагноз на основі результатів вимірювань. Обов'язков проконсультуйтеся з лікарем.

⚠ Завжди необхідно дотримуватись базових заходів безпеки, особливо при використанні поруч із дітьми або безпритомними людьми.

⚠ Будь ласка, помістіть пристрій у місце, недоступне для дітей.

⚠ Уникайте потрапляння сонячних променів.

⚠ Не торкайтесь лінзи.

⚠ Модифікація пристрою заборонена.

⚠ Потрапляння мільких частинок, таких як батареї, кришка відсіку для батарей та пакувальний матеріал у дихальні шляхи, можуть призвести до задусіння.

⚠ Будь ласка, для очистки пристрою не використовуйте розчинник, спирт та бензин. Поводьтеся із пристроєм обережно.

⚠ Не занурюйте прилад у рідини.

⚠ Якщо прилад не використовується впродовж тривалого часу (3 місяці), витягніть батареї. В іншому випадку, вони можуть пошкодити прилад.

⚠ Якщо дисплей відображає індикатор низького заряду батареї, необхідно замінити батареї.

⚠ Не використовуйте старі та нові батареї разом.

3

3 СИМВОЛИ

Опис символів	
Наступні символи зустрічаються в даній інструкції користувача, на етикетках, на пристрої і аксесуарах. Деякі з символів відображають стандарти і відповідності, пов'язані з пристроєм.	
CE 0123	Відповідає європейській Директиві медичного обладнання 93/42 / ЕЕС та змінено Директиву 2007/47 / ЕС.
FACTORY	Інформація про виробника
EC REP	Уповноважений представник в Європейському Співтоваристві.
BOOK	Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації
CAUTION	Обережно! Перегляньте прикладені документи.
TYPE BF	Тип BF
LOT	Код партії
IP22	IP-код пристрою: ступінь проникнення твердих сторонніх предметів
WARRANTY	Дата виготовлення
WASTE	Утилізація: Не утилізуйте цей пристрій разом із побутовими відходами. Необхідно утилізувати його відповідно до місцевих законів.
WATER	Зберігати сухим
UP	Цим верхом вгору
GLASS	Хрихкий, поведіться обережно
WARNING	Обмеження рівня складання

4

⚠	Увага: небезпеки такого рівня можуть спричинити персональні травми або смерть.
⚠	Обережно: небезпеки такого рівня можуть спричинити пошкодження власності, приладу, або персональну травму.
SN	Серійний номер.
—	Струм.
BOOK	Інструкції з експлуатації.
⚠	Ознайомтеся з прикладеними документами.

⚠ **Увага:** Не утилізуйте цей пристрій разом із побутовими відходами. Необхідно утилізувати його відповідно до місцевих законів.

Класифікація:

1. Обладнання із внутрішнім живленням.
2. Тип BF
3. Захист від проникнення води: IPX0
4. Категорія обладнання AP/APG
5. Режим роботи: безперервна робота.

Примітка:

Перед використанням необхідно перевірити всі функції пристрою і впевнитись в їх правильній роботі.

5



ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ

ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ ЩОДО МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗДРАВО», код ЄДРПОУ: 34603398

(повне найменування суб'єкта господарювання (виробника або уповноваженого представника),

Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, літ. А, офіс, що є уповноваженим представником в Україні та діє за дорученням виробника ShenZhen Medek Bio-Medical Co., Ltd., No.101 of Wenhao Industrial District, No.13 of Yuanxin Road, Baolong Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, P.R.China

(який декларує відповідність продукції та його місцезнаходження)

в особі Генерального директора Люся Валерія Аркадійовича

(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

підтверджує, що продукція: Термометри безконтактні інфрачервоні моделей MDI901, MDI906 та MDI907, клас 1 за критеріями класифікації згідно додатку 2 технічного регламенту щодо медичних виробів, код УКТ ЗЕД 9025192090

(повна назва електрообладнання, тип, марка, модель та ідентифікаційні дані за необхідності)

що виготовляється: ShenZhen Medek Bio-Medical Co., Ltd., No.101 of Wenhao Industrial District, No.13 of Yuanxin Road, Baolong Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, P.R.China

(найменування та місцезнаходження виробника)

відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 за процедурою, встановленою додатком 8 технічного регламенту та стандартів:

- EN 980:2008 Symbols For Use In The Labelling Of Medical Devices;

(позначення національних стандартів та стандартів Європейського Союзу)

- EN 1041:2008, Information supplied by the manufacturer with medical devices;

- ДСТУ EN ISO 13485:2015 Медичні вироби. Система управління якістю. Вимоги до регулювання (EN ISO 13485:2012, IDT; ISO 13485:2003, IDT);

- ДСТУ ISO 14971:2009, Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком (ISO 14971:2007, IDT) (EN ISO 14971:2012, Medical devices - Application of risk management to medical devices);

- ДСТУ ISO 15223-1:2015 Засоби медичної техніки. Умовні позначки на етикетках засобів медичної техніки, маркування й обов'язкові відомості. Частина 1. Загальні вимоги (ISO 15223-1:2007, IDT);

- ДСТУ EN 60601-1:2015 Вироби медичні електричні. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик (EN 60601-1:2006; A11:2011, IDT);

- ДСТУ EN 60601-1-2:2017 Вироби медичні електричні. Частина 1-2. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додатковий стандарт. Електромагнітна сумісність. Вимоги та випробування (EN 60601-1-2:2015, IDT; IEC 60601-1-2:2014, IDT);

- ДСТУ EN ISO 10993-1:2015 (EN ISO 10993-1:2009, IDT; ISO 10993-1:2009, IDT) Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 1. Оцінювання і тестування в рамках процесу управління ризиками (EN ISO 10993-1:2009, ISO 10993-1:2009, IDT);

- ДСТУ EN 60601-1-6:2015 Вироби медичні електричні. Частина 1-6. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додатковий стандарт. Експлуатаційна придатність (EN 60601-1-6:2010, IDT);

- ДСТУ EN 60601-1-8:2015 Вироби медичні електричні. Частина 1-8. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Загальні вимоги, випробування і настанова щодо систем тривожної сигналізації в медичних електричних виробах та медичних електричних системах (EN 60601-1-8:2007, AC:2010, A1:2013, IDT);

- ДСТУ EN 60601-1-11:2015 Вироби медичні електричні. Частина 1-11. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додаткові вимоги до медичного електричного обладнання та медичних електричних систем, призначених для надання медичної допомоги в домашніх умовах (EN 60601-1-11:2010, IDT);

- ДСТУ EN 62304:2014 Програмне забезпечення медичних пристроїв. Процес життєвого циклу програмного забезпечення (EN 62304:2006, IDT);

UA.TR. 753.D. 34603398/100-18

23 листопада 2018 року



- ДСТУ EN 62366:2015 Вироби медичні. Застосування ергономічного проектування медичних виробів (EN 62366:2008, IDT);
- ДСТУ EN ISO 80601-2-56:2014 Медичне електричне обладнання. Частина 2-56. Вимоги щодо базової безпеки та основних робочих характеристик клінічних термометрів для вимірювання температури тіла (EN ISO 80601-2-56:2012, IDT);

Декларація складена на підставі: технічної документації, яка сформована згідно вимог п. 3 Додатку 2 до технічного регламенту щодо медичних виробів.

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника або уповноваженого представника: ТОВ «ЗДРАВО», Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, літ. А, офіс, код ЄДРПОУ: 34603398


Генеральний директор



(підпис)

Печатка

Лось В.А.
(ПБ уповноваженої особи постача

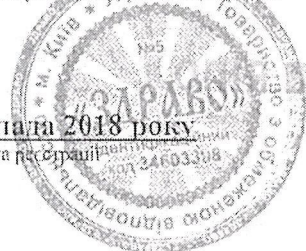

UA.TR. 753.D. 34603398/100-18

Регістраційний №

23 листопада 2018 року

дата реєстрації

Вимірювання температури об'єктів:

1) Вибірть режим вимірювання об'єкту, буде відображена одиниця вимірювання.

2) Піднесіть датчик близько до об'єкту (5-8 сантиметрів), впевніться що поверхня гладка. Натисніть на кнопку старт щоб почати вимірювання.

3) Вимірювання буде завершено за 3 секунди, коли воно буде закінчено, ви почуєте з короткі сигнали. Вимірне значення буде відображено на дисплеї.



Примітка:

- ✓ На вимірюванні дані може впливати температура оточуючого середовища.
- ✓ Термометр автоматично вимкнеться після 60 секунд в режимі очікування.

8 ВИРІШЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Символ	Вирішення несправностей
	В режимі вимірювання температури тіла, значення вище за 43 °C (109.4 °F). Відображається червоним кольором на дисплеї.
	В режимі вимірювання температури тіла, значення нижче за 32 °C (89.6 °F). Відображається червоним кольором на дисплеї.
	В режимі вимірювання температури об'єктів, значення вище за 100 °C (212 °F), або температура середовища експлуатації вища за 40 °C (104 °F). Відображається червоним кольором на дисплеї.
	В режимі вимірювання температури об'єктів, значення нижче за 0 °C (32 °F), або температура середовища експлуатації нижча за 5 °C (41 °F). Відображається червоним кольором на дисплеї.
	Низький заряд батареї, замініть їх на нові.
	На термометр впливає електромагнітне поле, або в системі є помилка.
ERR	

9 ОБСЛУГОВУВАННЯ

Обслуговування пристрою:

- ✓ Зберігайте пристрій в упаковці, коли він не використовується.
- ✓ Очистіть пристрій за допомогою сухої тканини. Не використовуйте розчинників або абразивів.
- ✓ Ніколи не поміщайте пристрій або його компоненти у воду.

Догляд

Не очисчайте пристрій за допомогою нафти, розчинювача або гасу.	Зберігайте пристрій у чистому та сухому місці. Не піддавайте пристрій впливу гарячих та холодних температур, вологи та прямого сонячного проміння.
Якщо пристрій не використовується з місяці або довше, вийміть батареї.	Не використовуйте пристрій у середовищі електромагнітного випромінювання (поблизу телефонів та мікрохвильових печей).

Примітка:

Ми не несемо відповідальності за будь-які проблеми з якістю, у випадку неналежного обслуговування пристрою.

6 НАЛАШТУВАННЯ

Для налаштування натисніть кнопку налаштування (Set). Для перемикання між параметрами функції використовуйте кнопку вніз (-) та кнопку вгору (+). Для переходу до наступної функції натискайте кнопку налаштування (Set).

Відображення функції на дисплеї	Функція	Опис (можливість налаштування)
F-1	Вибір одиниць вимірювання	Перемикання між Цельсієм і Фаренгейтом
F-2	Увімкнення та вимкнення звуку повідомлення	Коли звук увімкнено, будуть лунати повідомлення

7 ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Підготовка перед вимірюванням

Про нормальну температуру тіла і лихоманку: Температура на чолі відрізняється від температури всередині тіла, яка була виміряна орально чи ректально. Вазоконстрикція – це ефект стиснення кров'яних судин, який може виникати на різних етапах лихоманки. У цьому випадку, температура, виміряна безконтактним термометром може бути нижчою. Якщо точність вимірювання даних під сумнівом, вимірювання необхідно проводити через кожні 15 хвилин. Для порівняння, необхідно проводити вимірювання температури іншими методами, оральними або ректальними термометрами.

Температура тіла індивідуальна для кожної особи. Також вона залежить від області вимірювання. Нижче наведені статистичні дані нормальних температур для різних областей. Будь ласка, зверніть увагу на те, що виміряні температури на різних ділянках тіла будуть відрізнятися, навіть якщо вони виміряні одночасно. Лихоманка – це явище, коли температура вище норми. Вона може бути спричинена інфекцією. Деякі люди не страждають на лихоманку під час хвороби.

Будь-ласка, проконсультуйтеся з лікарем, якщо ви почуваетесь хворим, але у вас немає лихоманки.

Таблиця 1 Температурні діапазони для різних частин тіла

Область вимірювання	Температурний діапазон
Оральна	$37^{\circ}\text{C} \pm 0,6^{\circ}\text{C}$ ($98,6^{\circ}\text{F} \pm 1^{\circ}\text{F}$)
Ректальна/вухна	на $0,3^{\circ}\text{C} - 0,6^{\circ}\text{C}$ ($0,5^{\circ}\text{F} \pm 1^{\circ}\text{F}$)
Порожнина	вище оральної температури
Пахви	на $0,3^{\circ}\text{C} - 0,6^{\circ}\text{C}$ ($0,5^{\circ}\text{F} \pm 1^{\circ}\text{F}$)
	нижче оральної температури

Вимірювання температури

Вимірювання температури тіла:

1) Виберіть Режим вимірювання температури тіла на панелі термометру. Висвітлюється одиниця вимірювання.

2) Помістіть датчик термометру напроти чола на відстані 5-8 см. Натисніть кнопку START.


3) Вимірювання буде завершено за 1 секунду, коли воно буде закінчено, ви почуєте звуковий сигнал. Виміряне значення буде відображено на Дисплеї.



Примітка:

- ✓ Якщо зчитувані дані $< 37,5^{\circ}\text{C}$ ($99,5^{\circ}\text{F}$) та вище або рівні $> 32^{\circ}\text{C}$ ($89,6^{\circ}\text{F}$), дисплей буде відображати зелений індикатор.
- ✓ Якщо зчитувані дані вищі за встановлені межі температури лихоманки, які менше ніж $38,5^{\circ}\text{C}$ ($101,3^{\circ}\text{F}$), дисплей відобразить 10 коротких сигналів помаранчевого кольору.
- ✓ Якщо зчитувані дані вищі за встановлені межі температури лихоманки, які менше ніж 43°C ($109,4^{\circ}\text{F}$), дисплей відобразить 10 коротких сигналів червоного кольору.
- ✓ Вимірювання можна проводити знову, коли висвітлюється одиниця вимірювання ($^{\circ}\text{C}$ або $^{\circ}\text{F}$).
- ✓ На дані температури, вимірювання температури в області чола, можуть впливати багато факторів.
- ✓ На вимірювання може впливати температура оточуючого середовища.
- ✓ Температура шкіри немовлят дуже чутлива до температури оточуючого середовища. Не вимірюйте температуру безконтактним термометром після годування немовлят грудьми.
- ✓ Термометр автоматично вимкнеться після 60 секунд в режимі очікування.

**Термометр безконтактний
інфрачервоний
Модель: MDI907
Інструкція Користувача**

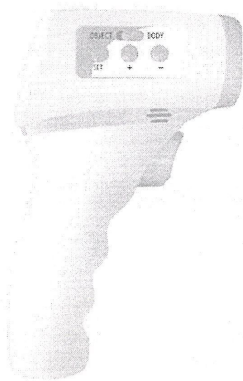

Примітка: Причиною неточних результатів може бути неправильна експлуатація. Відстань до чола при вимірюваннях повинна складати 5-8 см.

Зміст

1. ВСТУП.....	2
2. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ.....	3
3. СИМВОЛИ.....	4
4. СТРУКТУРА ПРИСТРОЮ.....	6
5. ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЇ.....	7
6. НАЛАШТУВАННЯ.....	8
7. ЕКСПЛУАТАЦІЯ.....	9
8. ВИРІШЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ.....	12
9. ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	13
10. СПЕЦИФІКАЦІЇ.....	14
11. ГАРАНТІЯ.....	15

1 ВСТУП

- Цей термометр використовує метод сучасного інфрачервоного випромінювання для точного вимірювання температури об'єкту або температури в області.
- Термометр зручний для використання, а вимірювання займає лише одну секунду.
- Термометр безпечний і гігієнічний. Для вимірювання температури за допомогою цього термометра не потрібний контакт. Ергономічний дизайн робить вимірювання температури зручним. Вимірювання температури потребує лише однієї секунди.
- **Режими вимірювання:**
 - Термометр підтримує режими вимірювання температури тіла та об'єктів. Діапазон вимірювання для об'єктів становить від до 100° C, або 32 – 212 °F.
 - При перевищенні температури 37,5 градусів по Цельсію пролунає 10 звукових сигналів.
- **Функція пам'яті:**
 - Зберігає одне попереднє виміряне значення.
- **Автоматичне вимкнення:**
 - Пристрій автоматично вимикається після 60 секунд простою.
- **Вимірювання:**
 - Інтервал між вимірюваннями складає 15 секунд, дистанція складає 5-8 см.

Перед використанням пристрою уважно ознайомтесь з інформацією, наведеною в даній інструкції користувача. Зберігайте її для подальшого використання.



11023
ISO/IEC 17065

UA-TR.001

Зареєстровано за №
Ref. Certif. No.

UA-TR.001 54-19

Rev.0

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВІРІВНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

STATE ENTERPRISE «ALL-UKRAINIAN STATE RESEARCH AND PRODUCTION CENTER FOR STANDARDIZATION, METROLOGY, CERTIFICATION AND CONSUMERS' RIGHTS PROTECTION» (SE "UKRMETRTESTSTANDART")

СЕРТИФІКАТ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ

Type-examination Certificate

Виданий:

Issued to:

ShenZhen Medek Bio-Medical Co., Ltd

No. 101 of Wenhao Industrial District, No. 13 of Yuanxin Road, Baolong Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, P.R. China

Уповноважений представник

Authorized representative

ТОВ «ЗДРАВО»

04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, літ. А, офіс

Відповідно до:

In accordance with:

Додатку 3, розділ «Модуль В (перевірка типу)» до Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94

Annex III, section «Module B (type examination)» of the The Technical Regulation for Legally Regulated Measurement Instruments approved by the decision of The Cabinet of Ministers of Ukraine of 13 January 2016 № 94

Тип засобу вимірювальної техніки:

Type of measuring instrument:

Термометри безконтактні інфрачервоні

Non-Contact Infrared thermometers

Позначення типу:

Type designation:

MDI901, MDI907

Дата видачі:

Date of issue:

05.03.2019

Чинний до:

Valid until:

05.03.2029

Кількість сторінок:

Number of pages:

11

Номер для посилань:

Reference №:

24/3/B/44/375-18

Номер призначеного органу:

Number of Designated body:

UA-TR.001

Цей сертифікат видано за результатами дослідження технічного проекту засобу вимірювальної техніки. Цей сертифікат підтверджує відповідність типу засобу вимірювальної техніки застосовним вимогам Технічного регламенту.

Відповідність засобів вимірювальної техніки, що їх надають на ринку України та/або вводять в експлуатацію, типу, описаному в цьому сертифікаті, і застосовним вимогам Технічного регламенту має бути підтверджена через проведення однієї з процедур оцінки відповідності за модулем, наступним за модулем В, згідно з вимогами Технічного регламенту.

This certificate is issued based on the results of examination of the technical design of the measuring instrument. This certificate confirms that the type of the measuring instrument meets the applicable requirements of the Technical Regulation.

The conformity of the measuring instruments being placed on the market and/or put into use with the type described in this certificate and applicable requirements of the Technical Regulation shall be established by one of the conformity assessment procedures according to module that follows module B as specified in the Technical Regulation.

Заступник керівника

органу з оцінки відповідності

Deputy director of Conformity Assessment Body

М.П.

Official stamp

Цей сертифікат може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення цього сертифіката без дозволу органу, що його видав, не дійсний. Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.

Адреса ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»: 4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна
Address SE "UKRMETRTESTSTANDART": 4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine

Телефон/факс: +38 (044) 526-52-29, факс/fax: +38 (044) 526-42-60, ел.пошта/e-mail: ukrsemt@ukrsemt.kiev.ua, web-сайт/website: www.ukrsemt.kiev.ua